

ナース・パット2

高通気性と吸湿分離性能で肌にやさしいナース・パット2は、褥瘡対策としても高い評価をいただいています。また、体位変換用の補助枕・ポジショニング枕としても、丸洗いで衛生的にご使用いただけます。その他、ドライカバーは保冷まわりの水滴防止効果が大きく、病院看護の現場で継続的に採用されています。ナース・パット2は、従来の機能を活かしながら一部の素材をグレードアップし、丈夫さと洗濯時の取り扱い易さを高めています。

ナース・パット2の機能

吸水性に優れた繊維と、水分透過性が高い繊維をからめた中綿は通気性に優れ、三層構造に重ねることにより適度な弾力を持ちます。それにより沈み込を防ぎ、望ましい体位保持を可能にします。

吸湿分離性に優れたカバーはムレや汗ベタを抑え、寝心地と使い心地に優れたパット・クッションです。

ナース・パット2の特徴

パットの表面から水分を除湿・分離するドライカバー＋吸水性の高い中綿を組み合わせました。

- ① 発汗を継続的に吸湿し、サラッとした肌を保ちます。
- ② 汗・湿潤を吸収し続けながらも表面に戻さないため、いつまでも湿り気のない使い心地です。
- ③ 呼吸をも通す通気性のよさで肌のムレを防ぎます。
- ④ 清拭効果を持続する機能を持ち、細菌の繁殖を抑えます。


ナース・パット2の構造

■ドライカバー

オモテ地は汗・水分を吸収しても湿らずサラッと乾き続けます。これにより、一般のシーツやバスタオルのように水分を吸収したあとのベタツキがなく、いつもさわやかな肌を保てます。

■中わた3層構造

中央吸汗層は超極太繊維の組み合わせにより、空気層が多くなり、水分の吸収量を増大させます。又、パット自体がマスクにもなるほど通気性が良く保温力を高めます。

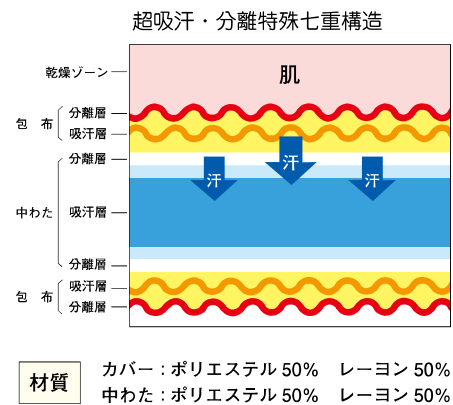

ナース・パット2の洗濯方法

- 敷きパットはカバーを外さず一体で折りたたみ、ヒモなどで縛った上洗濯ネットに入れて洗ってください。
- 補助枕は中のアンコを取り出し、中綿・カバーを一緒に洗ってください。(アンコを入れたままですと、乾きが遅くなります)
- 固定枕・ポジショニング枕は曲げたり折ったりせず洗ってください。(折り曲げると型崩れすることがあります)
- いずれの品も、カバーを外さず中綿と一体のまま洗ってください。
- 特に汚れがはげしい場合は漂白剤をご使用ください。
(血液・便などの汚れは漂白剤に漬け置きなどして、汚れを落としてから通常の洗いを行ってください)

製造・発売元

株式会社 看護用品研究所

〒343-0026 埼玉県越谷市北越谷 2-26-16

TEL (048) 976-8821

FAX (048) 977-6622

Web

<http://www.kangoyohin.com/>